



REHASENSE



HEAVY DUTY

# SERVER HD

HEAVY DUTY

De Heavy Duty versie van de Rehasense Server rollator. Met een versterkt extra breed gelast frame weegt de **Server HD** minder dan 8 kg. Een van de lichtste rollators in de markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht van 200 kg.



# SERVER HD

HEAVY DUTY



REHASENSE

## OPVOUWBAAR EN MAKKELIJK TE DRAGEN

De rollator is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingsstelsel welke tevens dient als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt kan worden.

## STABIEL EN DUURZAAM

Het frame en de zitting zijn getest voor een maximale belasting van 200 kg. De rollator geeft direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er mee gaat rijden. De rem en de handrem hoeven maar met heel weinig kracht te worden bediend. Mensen met weinig kracht in hun handen kunnen deze rollator makkelijk bedienen. TPE-gelaagde wielen met rubberen loopvlak.

## HOOGTE VERSTELBAAR

Een ruime range. De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen vanaf minimaal 66 cm bij de Medium tot maximaal 102 cm bij de Large.

## MATEN

De **Server HD** is verkrijgbaar in 2 maten – Medium en Large – 55 en 62 cm zithoogte met dezelfde brede zitting. Met de vaste zitting uit het assortiment van accessoires, is er ook nog een tussenhoogte in te stellen naar de behoefte van de klant.

## ACCESSOIRES

Voor de **Server HD** is praktisch het gehele brede assortiment aan Rehasense accessoires beschikbaar.



## TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur: Antraciet

Max. gebruikersgewicht: 200 kg

Artikelnummers:  
HRSGL600 (Large)  
HRSGL550 (Medium)

Afmetingen:  
(breedte x diepte x hoogte)  
Large : 69 x 68 x 74 – 102 cm  
Medium : 69 x 68 x 66 – 86 cm

Zitting breedte: 55 cm

Transport afmetingen gevouwen:  
(lengte x hoogte x breedte)  
Large : 68 x 86 x 22,5 cm  
Medium : 68 x 79 x 22,5 cm

Gewicht:  
Large : 7,9 kg  
Medium : 7,6 kg

Boodschappentas:  
(breedte x diepte x hoogte)  
35 x 17 x 25 cm  
Max. vulgewicht: 5 kg.

Standaard banden:  
Zwarte rubberen band (TPE)

Zachte banden:  
Zwarte, hoge en zachte polyurethaanband



Soepel instelbare handgreep-hoogte met 10 arreteer posities.




Zithoogtes 55 en 62 cm.



Onderhoudsvrije en TPE-gelaagde onbreekbare wielen.



Speciaal dubbel gelast versterkt driehoekprofiel garandeert de levensduur bij gebruik tot 200 kg.

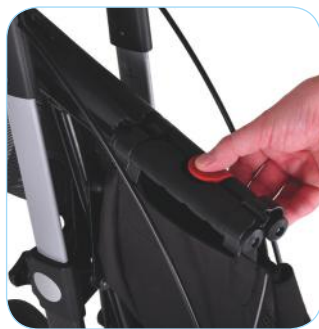

Blijft ingeklapt stevig gesloten met de drukknopsluiting.



Praktische boodschappentas, eenvoudig van de rollator te nemen door de speciaal ontworpen haken.



Alle versies zijn ook leverbaar met zachte banden.



Extra brede zitting 55 cm.



De **Server HD** is CE-gecertificeerd en voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

Copyright © Rehasense® 2021

Rehasense Benelux  
Markeweg 81  
8398 GM Blesdijke  
Netherlands